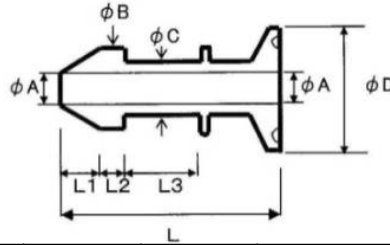


# S-バイオ・バーブ(S-Bio Barbs) ポリプロピレン USP Class VI適合 FDA DMF9040

ポリプロピレン製のタケノコ付きヘルールでASME-BPE規格の小口径(1/2", 3/4"等)用と1", 1.5"用があります。全て10個入り。型番が変わります。


**寸法表(mm)**

型番 (旧型番)	内径 $\phi A$	外径 $\phi B$	外径 $\phi C$	ヘルール外径 $\phi D$	全長 L	テーパ-長 L1	上部フラット長 L2	中央フラット長 L3
PPMTC0125BB (PPMINITC0125BB)	3.1	7.9	6.0	25.0	42.9	6.0	4.5	14.7
PPMTC0250BB (PPMINITC0250BB)	6.4	10.3	8.0	25.0	42.3	5.0	4.5	14.8
PPMTC0375BB (PPMINITC0375BB)	9.5	16.3	13.0	25.0	47.6	9.0	6.3	14.6
PPMTC0500BB (PPMINITC0500BB)	12.7	18.9	16.0	25.0	47.1	8.0	6.3	14.7
PPMTC0625BB (PPMINITC0625BB)	16.0	21.9	19.0	25.0	49.4	7.5	6.6	17.9
PPSTC0125BB (PP100/150TC0125BB)	3.1	7.9	6.0	50.5	47.0	6.0	4.5	14.7
PPSTC0250BB (PP100/150TC0250BB)	6.4	10.3	8.0	50.5	46.2	5.0	4.5	14.8
PPSTC0375BB (PP100/150TC0375BB)	9.5	16.3	13.0	50.5	51.8	9.0	6.3	14.6
PPSTC0500BB (PP100/150TC0500BB)	12.7	18.9	16.0	50.5	50.8	8.0	6.3	14.7
PPSTC0625BB (PP100/150TC0625BB)	16.0	21.9	19.0	50.5	49.4	7.5	6.6	17.9
PPSTC0750BB (PP100/150TC0750BB)	19.0	24.7	22.0	50.5	54.5	7.4	5.8	22.0
PPSTC0875BB (PP100/150TC0875BB)	22.2	28.1	25.4	50.5	54.5	7.3	5.8	22.0
PPSTC1000BB (PP100/150TC1000BB)	25.0	30.7	28.0	50.5	54.6	7.3	5.8	22.0

## バイオ・エンド・キャップ(Bio End Caps)

### フラット・バイオ・エンド・キャップ(Flat Bio End Caps)

ポリプロピレン USP Class VI適合 FDA DMF9040

ポリプロピレン製のエンドキャップでASME-BPE規格の小口径(1/2", 3/4"等)用と1", 1.5", 2", 2.5"用があります。全て10個入り。

**ヘルールの口径**
**型番** (FCがフラットです。)

小口径用

PPEC05000750 (旧PEC-500-750)

1", 1.5"用

PPEC05000750FC (旧PEC050075FC)

2"用

PPEC10001500 (旧PEC-100-150)

2.5"用

PPEC10001500FC (旧PEC100150FC)

PPEC2000FC (旧PEC-200-FC)

PPEC2500FC (旧PEC-250-FC)



## バイオ・クランプ(Bio Clamps) ガラス強化ナイロン USP Class VI適合

樹脂製ヘルールを破損させないための樹脂製クランプです。ASME-BPE規格の小口径(1/2", 3/4"等)用と1", 1.5"用, 2"用, 2.5"用, 3"用, 4", 6", 8"用があります。

ヘルール口径	型番
小口径用	NG075WHT (10個入りと100個入り)
1", 1.5"用	NG150WHT (10個入りと50個入り)
2"用	NG200WHT (10個入りと50個入り)
2.5"用	NG250WHT (10個入りと40個入り)
3"用	NG300WHT (10個入りと20個入り)
4"用	NG400WHT (5個入りと20個入り)
6"用	NG600WH (5個入り)
8"用	NG800WH (5個入り)



## バイオ・バルブ(Bio Valves) ガラス強化ナイロン USP Class VI適合

樹脂製ピンチバルブです。ねじ部がホースに接触しないため傷つけません。また、V字の溝にセットすることで片閉めを防ぐことができます。さらに、ハンドル部は誤操作を防ぐために封印することもできます。ND10以下用とND25以下用があり、小スケールのTFF(クロスフロー膜)の流量調整などにも最適です。全て5個入り。

名称	適応ホース	型番
Small Bio Valve	~ND10	BV0500NW
Large Bio Valve	~ND25	BV1000NW



注. ホースによっては使用に適さないことがあります。

### 輸入元

〒115-0051 東京都北区浮間4-23-21  
Watson-Marlow 株式会社  
TEL & FAX; 03-5918-8101  
URL; <http://www.watson-marlow.com/jp-ja>  
E-mail; [info@wmftg.jp](mailto:info@wmftg.jp)

### 販売者

〒101-0061 東京都千代田区神田三崎町2-20-1  
バイオ・ファーマ・サポート株式会社  
TEL; 03-3263-7257 FAX; 03-3263-7258  
URL; <https://www.bp-s.com> E-mail; [info@bp-s.com](mailto:info@bp-s.com)